



medifa 5000

Tables d'opération
mobiles

Made in Germany

Les avantages en un coup d'œil


- Modèles manuels et électroniques
- Versions bases (600 mm)
- Avec ou sans translation longitudinale
- Avec matelas en mousse visco-élastique ou mousse de polyuréthane
- Tous les composants métalliques sont en acier inoxydable de haute qualité (1.4301)
- Possibilités de nettoyage et de désinfection optimales
- Mobilité simple de la table à l'aide de roulettes avec stabilité de direction
- Mécanismes de déverrouillage facilement accessibles
- Concept de fonctionnement sophistiqué
- Multiples possibilités d'utilisation et de positions du patient
- Idéale pour les applications d'imagerie et pour l'utilisation d'amplificateur de brillance
- Vaste gamme d'accessoires pour toutes les disciplines chirurgicales
- Charge maximale admissible: 250 kg (550 lbs)



Variante manuelle

Variante électromécanique

Fonctionnalité et ergonomie

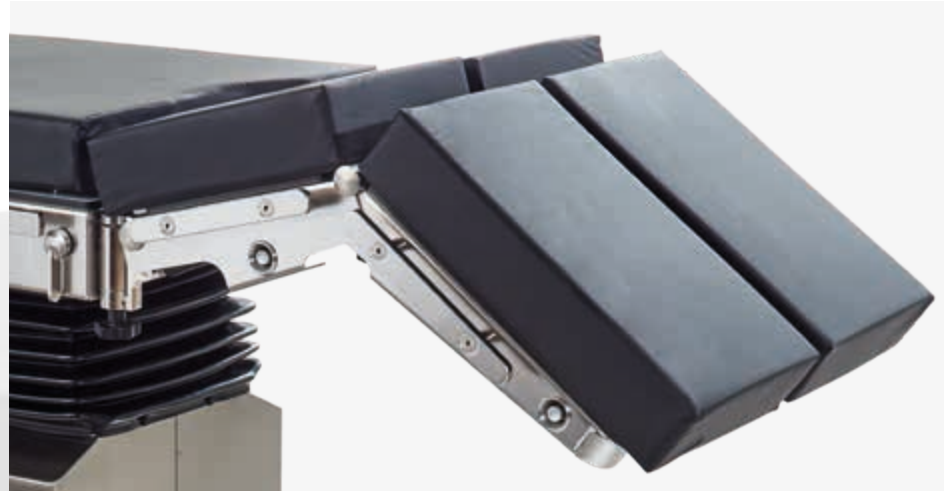

Fonctionnement simple et rapide

- Mécanismes de déverrouillage facilement accessibles



Ergonomie

- Maniabilité élevée grâce aux roulettes doubles
- Deux roulettes avant avec stabilité de direction, verrouillables par pédale de commande
- Frein central



Hauteur basse

- Des modèles spéciaux avec hauteur basse de 600 mm sont idéaux pour les applications en position assise



Billot mécanique (sauf 501010)


Toutes les variantes de la table medifa 5000 peuvent être équipées en option d'un billot mécanique

Flexibilité et confort



Un système de fixation unique pour tous les matelas

- Fixation et retrait des matelas par un système de goupilles
- Particulièrement hygiénique et facile à nettoyer (pas de fermeture velcro)
- Changement facile entre matelas en SF et PUR

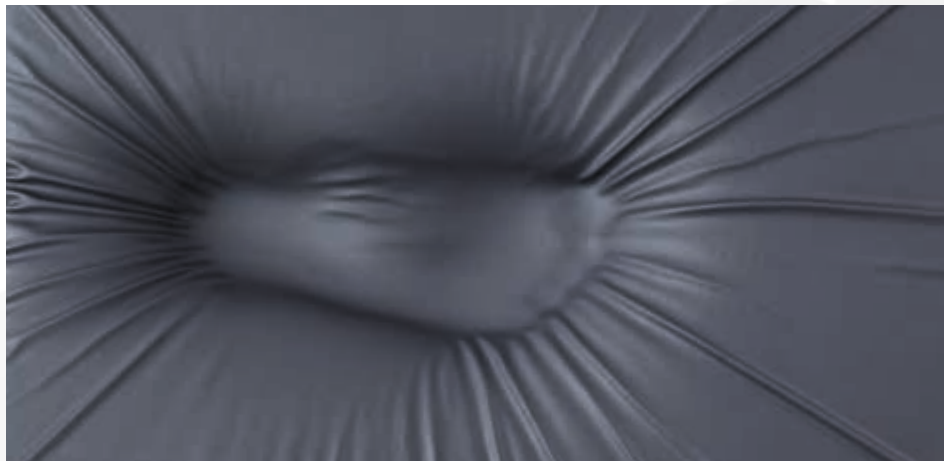

Confort et hygiène

- Des coussinets souples et hygiéniques préviennent les infections nosocomiales et améliorent la sécurité des patients



Matelas SF (sauf 501010)

- Mousse viscoélastique très souple anti-affaissement
- Prévention des escarres
- Épaisseur: 80 mm
- Amovibles
- Antistatique
- Radiotransparent



Matelas PUR

- Matelas ergonomiques en polyuréthane
- Épaisseur: 60 mm
- Amovibles
- Antistatique
- Prévention des escarres

Concept de manipulation



- Ecran couleur
- Versions pouvant adopter jusqu'à trois positions d'utilisation
- Capable de mémoriser jusqu'à trois positions d'utilisation
- Mode inversé
- Touches pour les réglages
- Touche d'arrêt d'urgence
- Bouton marche/arrêt
- Position zéro (réglages simultanés)

1. En standard: Télécommande manuelle avec rétro-éclairage, avec écran couleur et indicateur de batteries
2. En standard: Commande supplémentaire intégrée au pilier pour les fonctions électriques
3. En option: Télécommande manuelle infrarouge (sans câble) avec rétro-éclairage, avec écran couleur et indicateur de batteries (réf. 604070)
4. En option: Commande à pédale pour les fonctions basiques hauteur, proclive / déclive, inclinaison latérale (réf. 604060)



medifa 5000 BASIC



Tables d'opération mobiles basiques

Réf. 501010

- Réglage en hauteur par pompe à pied hydraulique de 740 à 990 mm
- Réglage en proclive / en déclive, assisté par vérin pneumatique, de -30° à +30°
- Réglage latéral, assisté par vérin pneumatique, jusqu'à 20°
- Réglage du dossier, assisté par vérin pneumatique, de -40° à +75°
- Possibilité de position flex / reflex
- Tunnel continu pour cassettes radiographiques
- Rails latéraux pour montage d'accessoires (25 x 10 mm)
- Mobilité assurée par quatre roulettes doubles Ø 100 mm, 2 avec blocage, 2 à direction stabilisée



Table d'opération transportable



Chariot-brancard pour les urgences



Recommandation de configuration

Réf. 501010

Table d'opération manuelle

Réf. 61148

Repose-tête

Réf. 61618

Plaques jambières divisées

Réf. 61220

Appui-bras

Prix sur demande!



Spécialités

- Ambulatoire
- Soins aux urgences

Toutes les versions du medifa 5000 peuvent être équipés de nombreux accessoires en option (à partir de p. 30)!



medifa 5000 manuel



Table d'opération manuelle

Réf. 501130

- Réglage en hauteur par pompe à pied hydraulique de 750 à 1000 mm
- Réglage en proclive / en déclive, assisté par vérin pneumatique, de -30° à +30°
- Réglage latéral par manivelle amovible, jusqu'à 20° des deux côtés
- Réglage du dossier, assisté par vérin pneumatique, de -40° à +70°
- Possibilité de position flex / reflex
- Tunnel continu pour cassettes radiographiques
- Rails latéraux pour montage d'accessoires (25 x 10 mm)
- Matelas en polyuréthane PUR (Épaisseur: 60 mm) ou viscoélastique SF (Épaisseur: 80 mm), antistatique, amovible
- Quatre roulettes doubles pivotantes ø 125 mm avec blocage centralisé, antistatiques, deux roulettes avec stabilité de direction
- Charge totale maximale autorisée : 200 kg



Autres modèles manuels:

Réf. 501135

En plus avec translation longitudinale manuelle jusqu'à 310 mm



Recommandation de configuration

Réf. 501130

Table d'opération manuelle

Réf. 61144SF

Repose-tête

Réf. 61655SF

Billot mécanique

Réf. 61615SF

Plaques jambières divisées

Réf. 61220SF

Appui-bras

Prix sur demande!

Spécialités

- Ambulatoire
- Chirurgie générale
- Gynécologie
- Urologie
- Proctologie



Toutes les versions de la table medifa 5000 peuvent être équipées de nombreux accessoires en option !

medifa 5000 électrique



Table d'opération électromécanique

Réf. 504320

- Réglage électromécanique de la hauteur de 780 à 1,080 mm
- Réglage électromécanique en procline / en déclive, de -30° à +25°
- Réglage latéral électromécanique, 20° des deux côtés
- Réglage électromécanique du dossier de -40° à +70°
- Possibilité de position flex / reflex
- Mise à zéro automatique
- Télécommande filaire avec écran couleur et indication du niveau de charge de la batterie pour les fonctions électriques
- Panneau de commandes supplémentaire sur la colonne de la table
- Tunnel continu pour cassettes radiographiques
- Rails latéraux pour montage d'accessoires (25 x 10 mm)
- Matelas en polyuréthane PUR (Épaisseur: 60 mm) ou viscoélastique SF (Épaisseur: 80 mm), antistatique, amovible
- Déplacement par quatre roulettes doubles pivotantes ø 125 mm, dissipatrices d'électricité, deux roulettes stables dans le sens de la marche grâce à un frein central, blocage par pédale
- Alimentation 110 V ou 220 V/ 50-60 Hz et batteries intégrées avec chargeur



Autres modèles électriques avec

hauteur standard:

Réf. 504325

En plus avec déplacement longitudinal jusqu'à 285mm

Réf. 504220

Réglage du dossier, assisté par vérin pneumatique

Réf. 504225

Réglage du dossier, assisté par vérin pneumatique et translation longitudinale jusqu'à 285 mm



- Toutes les variantes électromécaniques sont disponibles avec hauteur basse de 600 mm
- Au choix réglage du dossier manuel ou électrique
- Illustration des configurations possibles en pages 14 et 15

Recommandation de configuration

Réf. 504220

Table d'opération électromécanique

Réf. 61144SF

Repose-tête

Réf. 61655SF

Billot mécanique

Réf. 61615SF

Plaques jambières divisées

Réf. 61220SF



Appui-bras

Prix sur demande!

Spécialités

- Ambulatoire
- Chirurgie générale
- Gynécologie
- Urologie
- Proctologie

Les modèles en un coup d'œil

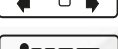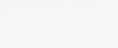			Manuel		
					
		Plage de réglage	501010	501130	501135
	Réglage de la hauteur	740 - 990 mm	■		
	Réglage de la hauteur	750 - 1000 mm		■	■
	Réglage de la hauteur	780 - 1080 mm			
	Réglage de la hauteur	600 - 950 mm			
	Réglage en proclive/déclive	-30° / +30°	■	■	■
	Réglage en proclive/déclive	-30° / +25°			
	Réglage latéral	-20° / +20°	■	■	■
	Réglage du dossier	-40° / +70°			
	Réglage du dossier	-40° / +75°	■	■	■
	Plateau à translation	310 mm			■
	Plateau à translation	285 mm			
	Mise à zéro				
	Position flex / reflex		■	■	■
	Frein central			■	■
	Billot			◆	◆
	Mémoires (3 positions)				
	Charge maximale admissible		200 kg	200 kg	200 kg

Électrique			
			
504220	504225	504320	504325
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
■	■		■
	●		●
●	●	●	●
■●	■●	●	●
■	■	■	■
◆	◆	◆	◆
●	●	●	●
200 kg	200 kg	250 kg	250 kg

Électrique et basses			
			
505220	505225	505320	505325
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
■	■		■
	●		●
●	●	●	●
■●	■●	●	●
■	■	■	■
◆	◆	◆	◆
●	●	●	●
200 kg	200 kg	250 kg	250 kg

Positionnements



Support dorsal pour la chirurgie générale



Positionnement latéral pour chirurgie thoracique



Gynécologie, urologie et proctologie en position de lithotomie




Support dorsal arthroscopie du genou




Positionnement pour arthroscopie de l'épaule


Caractéristiques techniques

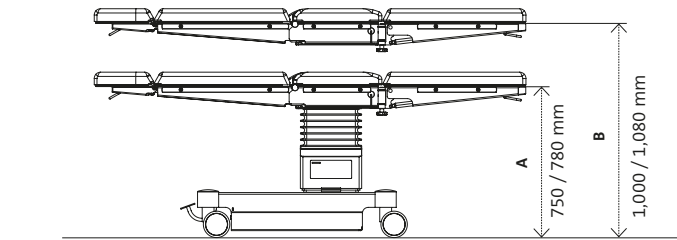

Modèles	Plage de réglage	
	Hauteur A	Hauteur B
501130 / 501135	750 mm	1,000 mm
504220 / 504225 / 504320 / 504325	780 mm	1,080 mm









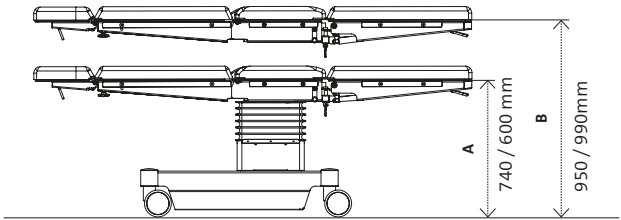


Modèles	Plage de réglage	
	Hauteur A	Hauteur B
505220 / 505225 / 505320 / 505325	600 mm	950 mm
501010	740 mm	990 mm

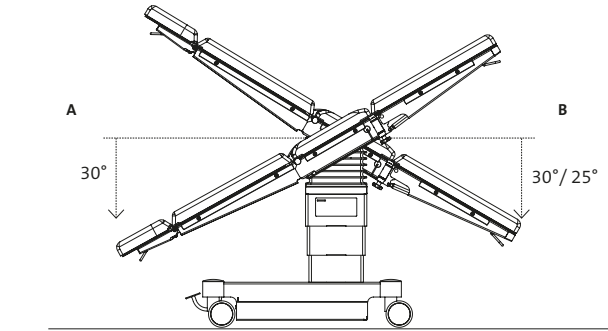


Modèles	Plage de réglage	
	A	B
501130 / 501135 / 501010	30°	30°
504220 / 504225 / 504320 / 504325	30°	25°
505220 / 505225 / 505320 / 505325	30°	25°


Spécifications de longueur avec matelas en SF

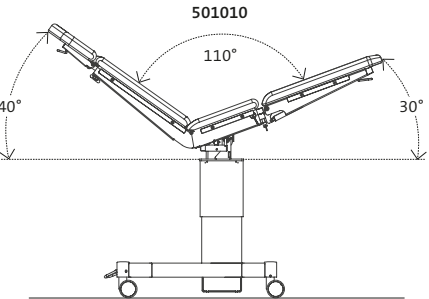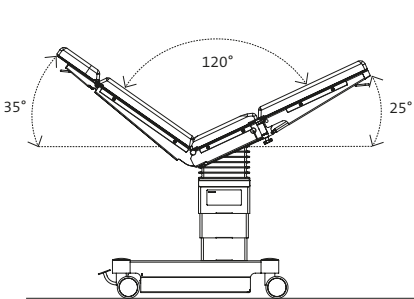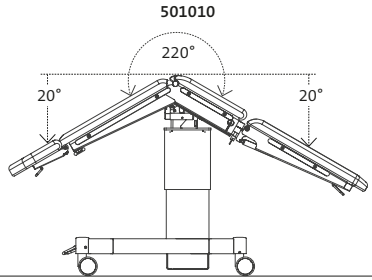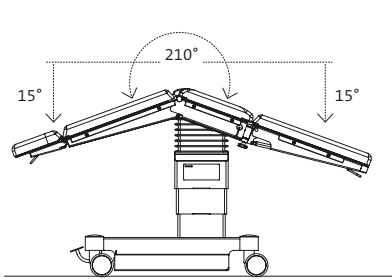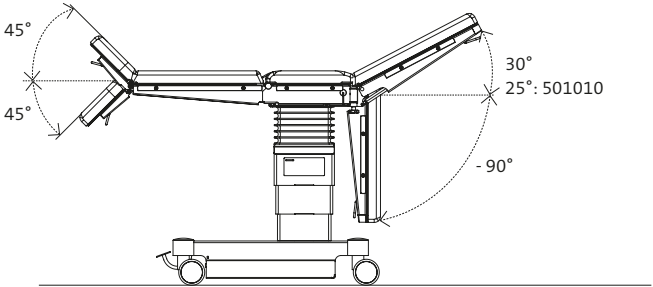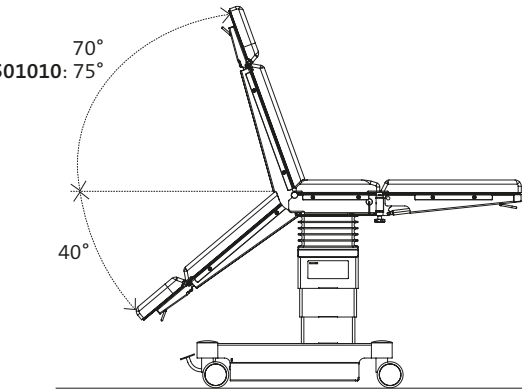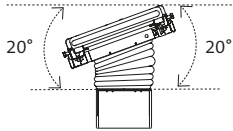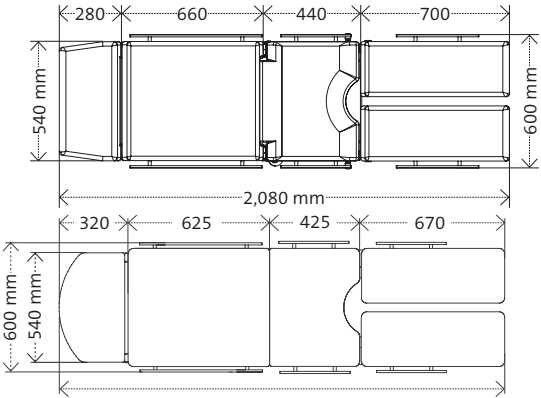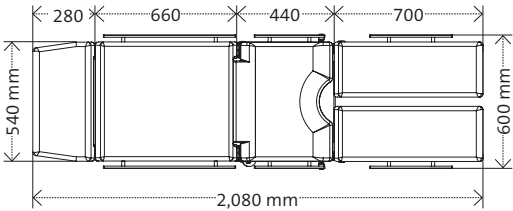


Modèles	Imagerie per-opératoire
501135	
504225 / 504325 505225 / 505325	

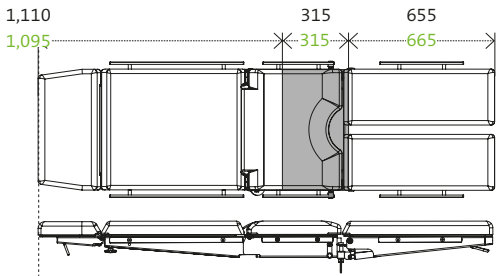

Plateau à translation (à gauche)

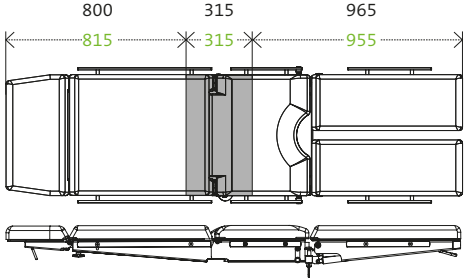



Plateau à translation (à droite)

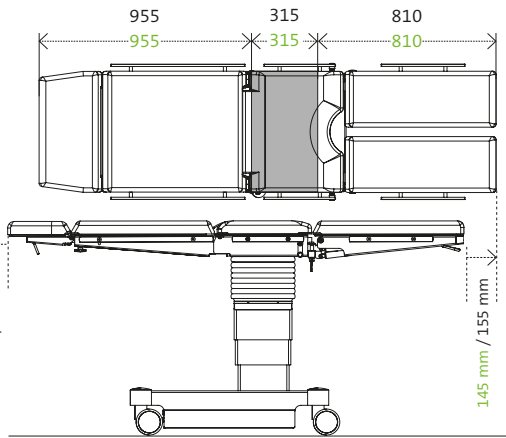

Mise à zéro

Les données techniques sont soumises à une tolérance industrielle générale de $\pm 3\%$.

Configuration (sauf 501010)

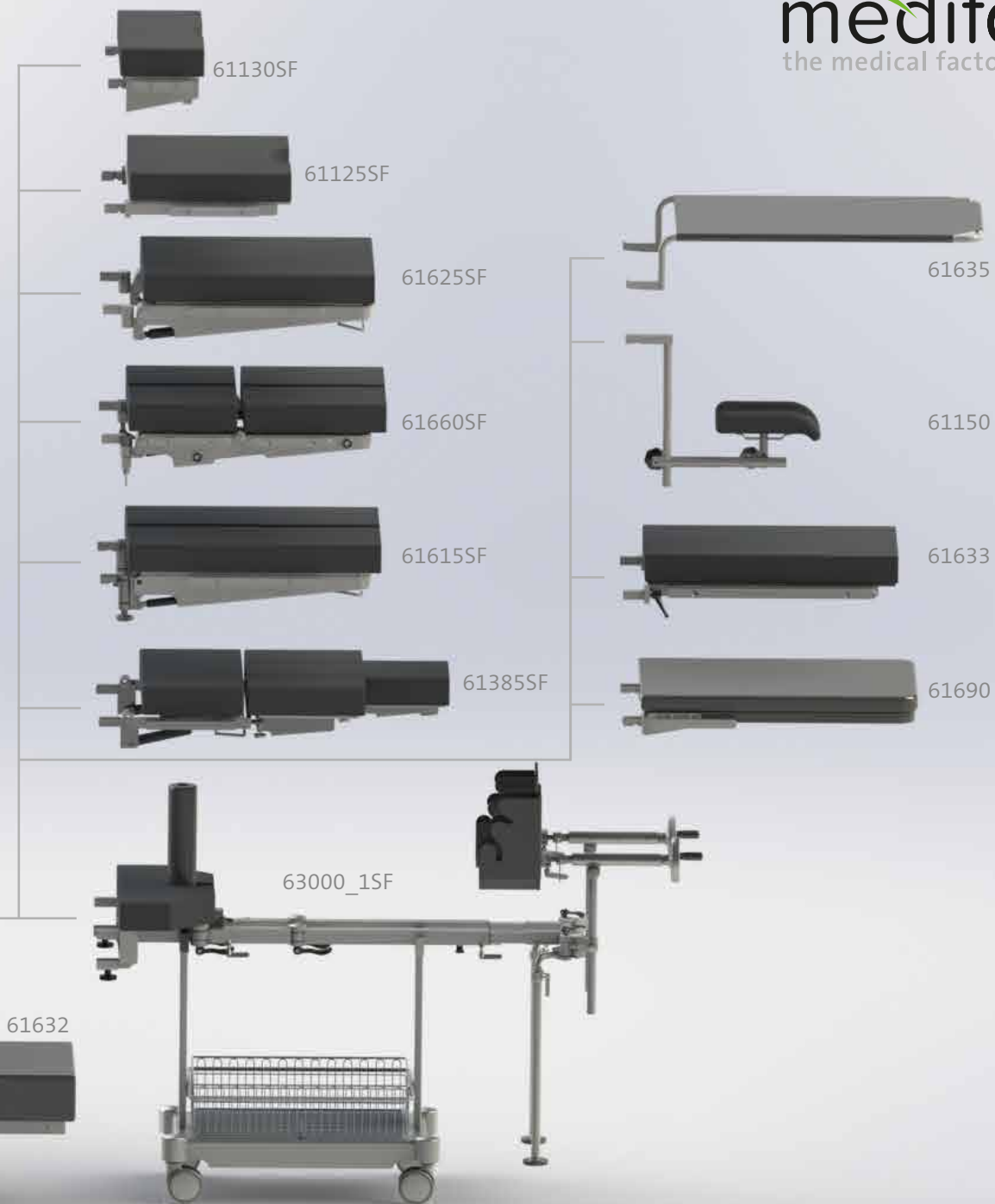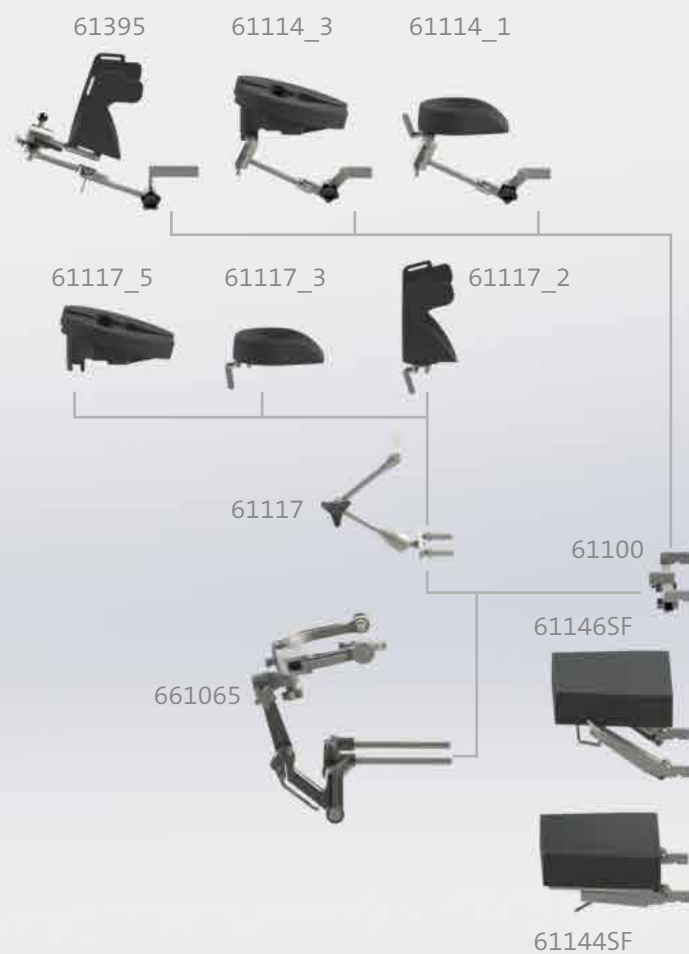

Accessoires pour medifa 5000



Commande au pied pour medifa 5000 et 6000

Réf. 604060

- Pour réglage de la hauteur, inclinaison latérale, proclive et déclive
- Avec câble
- Pas de montage a posteriori



Télécommande manuelle infra rouge pour medifa 5000 et 6000

Réf. 604070

- Avec touches pour toutes fonctions électriques
- Avec chargeur



Barre de stabilité transversale radiotransparente pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61670

- Remplace la barre métallique assurant une radiographie de la partie dorsale sans restrictions



Billot mécanique pour medifa 5000 et modèle 601120

Réf. 61655SF

- Réglable par manivelle
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, radiotransparent, amovible
- Disponible avec matelas PUR (polyuréthane) en option, épaisseur 60 mm (Réf. 61655)
- Pas de montage a posteriori



Repose-tête pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61144SF

- Réglage simple par vérin à gaz de -45° à +45°
- Adaptable au dossier
- L x l: 285 x 495 mm
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, radiotransparent, amovible
- Disponible avec matelas PUR (polyuréthane) en option, épaisseur 60 mm (Réf. 61144)



Repose-tête a double articulation pour medifa 5000 et 6000

Réf. 61146SF

- Réglage simple par vérin à gaz de -45° à +45°
- Adaptable au dossier
- L x l: 285 x 495 mm
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, radiotransparent, amovible
- Disponible avec matelas PUR (polyuréthane) en option, épaisseur 60 mm (Réf. 61146)

Accessoires pour medifa 5000



Dossier en trois parties pour medifa 5000 et modèle 601120
Réf. 61385SF

- Accès facile à l'épaule grâce aux 3 segments d'épaule amovibles
- À monter sur la section pelvienne
- Réglage simple par vérin à gaz
- Avec petit repose-tête
- L x l: 315 x 170 mm par segment
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, radiotransparent, amovible
- Disponible avec matelas PUR (polyuréthane) en option, épaisseur 60 mm (Réf. 61385)



Rallonge pour la section pelvienne pour medifa 5000 et 6000
Réf. 61125SF

- Rallonge de la section pelvienne de 430 mm
- Avec découpe gynécologique
- L x l: 430 x 540 mm
- Rails (UE) intégrés
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, radiotransparent, amovible
- Disponible avec matelas PUR (polyuréthane) en option, épaisseur 60 mm (Réf. 61125)



Rallonge pour la section pelvienne pour medifa 5000 et 6000
Réf. 61130SF

- Rallonge de la section pelvienne de 250 mm
- Avec découpe gynécologique
- L x l: 250 x 540 mm
- Rails (UE) intégrés
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, radiotransparent, amovible



Plaque jambière pour medifa 5000 et modèles 601120, 601700, 601820
Réf. 61625SF


- Réglage simple par vérin à gaz de -90° à +30°
- Adaptable à la section pelvienne
- Rails (UE) intégrés
- L x l: 670 x 540 mm
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, radiotransparent, amovible
- Disponible avec matelas PUR (polyuréthane) en option, épaisseur 60 mm (Réf. 61625)



Plaques jambières divisées pour medifa 5000 et modèles 601120, 601700, 601820 (paire)

Réf. 61615SF

- Réglage simple par vérin à gaz de -90° à +30°, écartement à 180°
- À monter sur la section pelvienne
- Rails (UE) intégrés
- L x l: 730 x 250 mm
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, radiotransparent, amovible
- Disponible avec matelas PUR (polyuréthane) en option, épaisseur 60 mm (Réf. 61615)

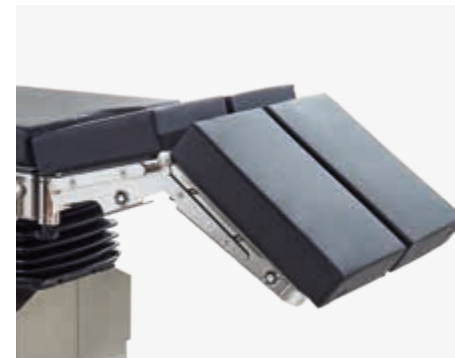

Plaques jambières divisées à double articulation pour medifa 5000 et modèles 601120, 601700, 601820 (paire)

Réf. 61660SF


- Réglage simple par vérin à gaz de -90° à +30°, écartement à 180°, rabattables
- À monter sur la section pelvienne
- Rails (UE) intégrés
- L x l: 720 x 250 mm
- Matelas: SF, H = 80 mm, antistatique, radiotransparent, amovible
- Disponible avec matelas PUR (polyuréthane) en option, épaisseur 60 mm (Réf. 61660)

Accessoires pour medifa 5000



Plaque de positionnement en fibre de carbone pour medifa 5000 et 6000
Réf. 61690

- Pas de restrictions en utilisant l'amplificateur de brillance (360°)
- Installation à l'assise de siège ou au dossier
- L x l: 750 x 540 mm
- Matelas: Visco-élastique, H= 45 mm, antistatique, radiotransparent, amovible

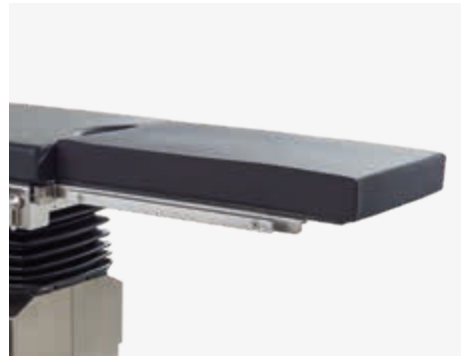


Plateau pour la chirurgie pédiatrique pour medifa 5000 et 6000
Réf. 61633

- A monter sur la section pelvienne
- Matelas amovible
- Rails (UE) intégrés
- L x l: 700 x 430 mm
- Matelas: SF, H = 60 mm, antistatique, radiotransparent, amovible



Plateau de jambes pour medifa 5000 et 6000
Réf. 61635

- De transfert pour un soutien de courte durée des jambes
- A monter sur la section pelvienne
- L x l: 900 x 500 mm
- Matériel: Acier inoxydable

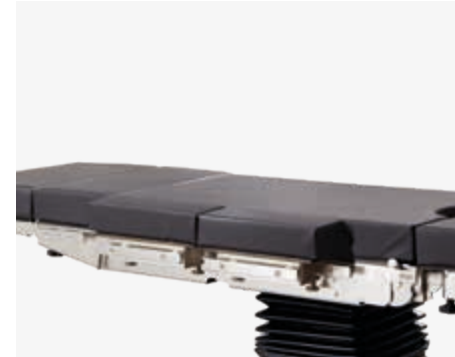


Elargisseur pour medifa 5000, 6000 et 7000 (paire)
Réf. 61355SF

- Eléments pour élargir le plateau
- Rails (UE) intégrés
- L x l: 310 x 110 mm par segment
- Matelas: SF, H = 70 mm, antistatique, radiotransparent, amovible
- Disponible avec matelas PUR (polyuréthane) en option, épaisseur 60 mm (Réf. 61355)



Set d'irrigation RTU pour medifa 5000 et 6000
Réf. 61120

- Se compose d'un seau, une cuvette, crépine, tuyau et chariot en inox
- Fixation incluse
- L x B x H (Cuvette): 325 x 265 x 65 mm
- Volume (Seau): 15 litres
- Matériel: Acier inoxydable

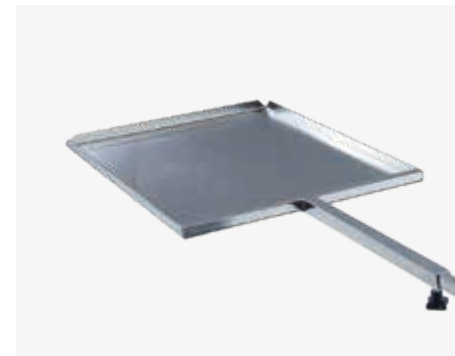

Passe-cassettes radiographiques pour medifa 5000 et 6000
Réf. 61640

- Avec tige télescopique
- L x l x H: 470 x 385 x 16 mm
- Pour cassettes radiographiques de 14" x 17" (mesure américaine)
- Matériel: Acier inoxydable

Accessoires pour medifa 5000 BASIC



Repose-tête pour medifa 5000 BASIC

Réf. 61148

- Réglable par vérin à gaz de -45° à +45°
- Adaptable au dossier
- L x l: 290 x 500 mm
- Radiotransparent
- Matelas: PUR, H = 40 mm, antistatique, détachable



Calotte de tête pour medifa 5000 BASIC

Réf. 61149

- En une pièce
- Réglable par articulation à rotule
- Matelas: PUR, antistatique



Plaques jambières divisées pour medifa 5000 BASIC (paire)

Réf. 61618

- Réglage simple par vérin à gaz de -90° à +25°, écartement à 180°
- Adaptable à la plaque de siège
- L x l: 660 x 250 mm par partie
- Radiotransparent
- Matelas: PUR, H = 40 mm, antistatique, détachable



Plaque jambière en une pièce pour medifa 5000 BASIC

Réf. 61628

- Réglage simple par vérin à gaz de -90° à +25°
- Adaptable à la plaque de siège
- L x l: 620 x 540 mm
- Radiotransparent
- Matelas: PUR, H = 40 mm, antistatique, détachable



Support pour medifa 5000 BASIC

Réf. 61090

- Pour bouteille d'oxygène



Corbeille pour medifa 5000 BASIC

Réf. 61093

- À fixer sur le socle de la table d'opération
- Fixation incluse
- Matériel: Acier inoxydable

Accessoires pour medifa 5000 BASIC



Pied de stabilisation pour medifa 5000 BASIC

Réf. 61094

- Réglable en hauteur
- Pour compenser les irrégularités du sol
- 4 pièces
- Matériel: Acier inoxydable
- Pas de montage a posteriori



Passe-cassettes radiographiques pour medifa 5000 BASIC

Réf. 61645

- Avec tige télescopique
- L x l x H: 485 x 410 x 16 mm
- Pour cassettes radiographiques de 14" x 17" (mesure américain)
- Matériel: Acier inoxydable



Bac de collecte carré en acier inoxydable pour medifa 5000 BASIC

Réf. 61088

- Pivotant
- L x l x H: 325 x 265 x 65 mm

Bac de collecte en acier inoxydable avec tuyau et écoulement pour medifa 5000 BASIC

Réf. 61089

- Pivotant
- L x l x H: 325 x 265 x 65 mm



Caisse de transport en aluminium pour medifa 5000 BASIC

Réf. 61095

- Pour un transport sécurisé de la table d'opération
- L x l x H: 1200 x 800 x 952 mm
- Matériel: Aluminium

Sur demande!

Accessoires complémentaires

Une vaste gamme d'accessoires à fixer pour différents domaines chirurgicaux.

Chariot porte-accessoires (réf. 341045) d'acier inoxydable pour le stockage central des accessoires.

Il comprend: 5 emplacements pour éléments avec matelas, 5 rails (25 x 10 mm) pour les accessoires ainsi qu'un rangement pour les objets de petite taille.



medifa

medifa
the medical factory

Compétence autour de la salle d'opération

En tant que fabricant leader international de dispositifs médicaux, medifa propose des solutions et des produits innovants pour les salles d'opération, les systèmes chirurgicaux hybrides mobiles et d'autres domaines dans les hôpitaux ou les centres de chirurgie ambulatoire.

Le large portefeuille de produits comprend des tables d'opération mobiles et des accessoires chirurgicaux, des tables d'opération mobiles en carbone, des éclairages opératoires (medifa H!Light) ainsi que des fauteuils d'examen et de traitement pour la gynécologie, l'urologie et la proctologie.


Le développement, la construction et la production se réalisent en Allemagne. Avec une grande part de valeur ajoutée dans le groupe, l'entreprise garantit à ses clients des temps de réaction rapides et une qualité élevée „Made in Germany“ conformément aux normes de qualité nationales et internationales certifiées.

medifa s'oriente résolument vers les exigences de ses clients. En accord avec le slogan „we care“, les clients du monde entier peuvent compter sur un conseil, un traitement et une qualité de premier ordre, fournis par un seul et même fournisseur.

Produits

- Éclairages opératoires (medifa H!Light)
- Tables d'opération mobiles
- Tables d'opération mobiles carbone pour applications mini-invasives
- Accessoires pour tables et éclairages opératoires
- Fauteuils d'examen et Fauteuils de soins (gynécologie, urologie et proctologie)
- Mobilier médical fonctionnel

medifa dans le monde

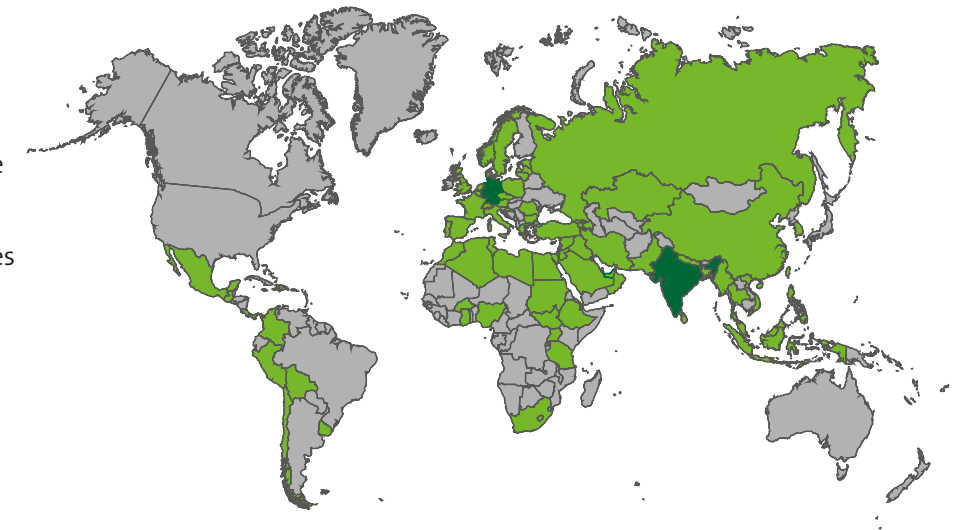



medifa GmbH

Industriestraße 5
57413 Finnentrop
Germany
fon +49 2721 71 77 -0
fax +49 2721 71 77 -255
info@medifa.com

Version 01-23-FR

Sous réserve de modifications dues au développement technique.

www.medifa.com

we care. Code



Made in Germany

we care.