



medifa 7000

Mesas de
operaciones móviles

Made in Germany

Ventajas de un vistazo

- Con hasta tres articulaciones accionadas
- Regulación de la altura de 580 a 1,100 mm
- Mecanismo de tracción electrónico integrable para mayor maniobrabilidad
- Opcionalmente con desplazamiento longitudinal
- Regulación eléctrica de placa apoya-piernas, simple o paralelo
- Sistema de seguridad a baterías integrable, para la activación de funciones
- Prevención de decúbito gracias a colchones especiales de 80 mm
- Opciones óptimas para la limpieza y la desinfección
- Concepto funcional bien elaborado
- Múltiples posibilidades de uso y de posición del paciente
- Ideales para uso con rayos X y para uso con arco en C
- Amplia gama de accesorios para todas las disciplinas quirúrgicas
- Carga máxima total de hasta 544 kg (1,200 lbs)





Accionamiento de traslación eléctrico

- Accionamiento de traslación eléctrico gracias a la quinta rueda que facilita la colocación de la mesa antes y después de la operación (ref. 70645)
- Asideros para el manejo motorizado de mesa de operaciones con preciso regulador de velocidad integrado (opcional, ref. 71570)



Manejo rápido y fácil

- La estructura modular, recientemente desarrollada, permite una rápida y eficiente adaptación de los módulos y accesorios



Confort e higiene

- Fijación y retirada de los acolchados por medio de un sistema de clavijas
- Particularmente higiénico y fácil de limpiar (sin cierres de velcro)
- Espuma viscoelástica muy suave que alivia la presión (espesor: 80 mm)
- Eléctricamente conductivo y radiotransparente



Regulación eléctrica de placa apoya-piernas

- Permite un posicionamiento cuidadoso y variable del paciente
- Ajuste eléctrico simultáneo o por separado de las apoya-piernas desde -90° hasta $+80^\circ$
- Función también aplicable para el ajuste eléctrico del respaldo en la posición inversa del paciente (perfecto para la artroscopia de hombro)



Placa de piernas dividida con ampliación de acceso

- Permite óptima accesibilidad al cirujano
- Basculante
- Ofrece espacio suficiente para una postura de trabajo ergonómica y mejor acceso al paciente
- Fácil acoplamiento y desacoplamiento en la placa pélvica
- opcional, ref. 71620

Concepto de manejo



- Display a color
- Navegación y confirmación del menú
- Modo reverso
- Freno central y activación de los cilindros estabilizadores
- Manejo electrónico
- Mando de posicionamiento
- Activación del mando manual
- Mando de parada de emergencia
- Puesta a cero simultánea

1. Estándar: Mando manual retroiluminado con display a color integrado e indicador de batería (opcional: mando a distancia por infrarrojo, ref. 704070, sin instalación ulterior)
2. Estándar: Panel de control adicional en la columna de la mesa
3. Opcional: Sistema de seguridad que asegura el funcionamiento de las funciones básicas de la mesa en caso de fallo eléctrico (ref. 70655, sin instalación ulterior)
4. Opcional: Accionamiento eléctrico de los movimientos altura, lateral y Trendelenburg por control de pie (ref. 704060)





Ejemplo de configuración

Ref. 700200
Mesa de operaciones móvil con desplazamiento longitudinal

Ref. 71640
Desplazamiento longitudinal

Ref. 71144
Apoya-cabeza

Ref. 71250_2
Placa dorsal superior

Ref. 71615
Placas para piernas

Ref. 61220SF
Apoya-brazos

¡Precio a consultar!

Aplicaciones

- Cirugía bariátrica
- Ortopedia
- Cirugía otorrinolaringológica
- Oftalmología
- Ginecología
- Urología

Mesa de operaciones móvil

Ref. 700200

- Regulación de la altura de 580 a 1,100 mm (con desplazamiento longitudinal adicional de 600 a 1,120 mm)
- Regulación Trendelenburg de -30° a +30°
- Regulación lateral hasta 20°
- Regulación del respaldo de -45° a +90°
- Regulación eléctrica de placa apoya-piernas de -90° a +90°, posibilidad de regulación individual o sincrónica
- Posibilidad del posicionamiento en modo reverso
- Posición flex / reflex ajustable al mando manual y al panel de comandos en la columna de la mesa
- Vuelta a posición inicial automática de la superficie
- Panel de comandos para los movimientos eléctricos en la columna de la mesa
- Freno central por 4 cilindros estabilizadores, deslizables, entre de las ruedas dobles
- Colchón viscoelástico con efecto memoria, espesor = 80 mm, eléctricamente conductivo
- Construcción modular e intercambiable de las placas de respaldo
- Carga máxima total: 544 kg (1,200 lbs)

Otras modelos:

Ref. 700300

Además con regulación eléctrica de placa apoya-piernas, regulación de la parte superior del respaldo y regulación eléctrica del puente biliar

Ref. 71640

Opcional: Desplazamiento longitudinal de la superficie de hasta 380 mm



- Regulación de la altura de 580 a 1,100 mm
- Posicionamiento del paciente también en modo reverso y cómodo acceso con el arco en C

Modelos

	Rango de regulación	700200	700300
	Regulación de la altura	580 - 1,100 mm	●
	Regulación Trendelenburg	-30° / +30°	●
	Regulación lateral	-20° / +20°	●
	Regulación del respaldo (parte inferior)	-45° / +90°	●
	Regulación del respaldo (parte superior)	-90° / +90°	●
	Puente de riñón	120 mm	●
	Flexión		●
	Desplazamiento longitudinal (71640)	hasta 380 mm	◆
	Regulación de placa apoya-piernas	-90° / +90°	●
	Regulación separada de apoya piernas	-90° / +90°	●
	Puesta a cero simultánea		●
	Unidad de tracción eléctrica (70645)		◆
	Freno central (Cilindros estabilizadores)		●
	Carga máxima total	544 kg	544 kg

● Eléctrico ◆ Opcional

Posicionamientos



Cirugía de tórax y renal
con anillo para la cabeza, apoya-brazos, soporte del cuerpo y cojín tubular



Cirugía de vesícula
con arco de anestesia, fija-brazo, almohadilla semicircular y talonera acolchada



Cirugía de columna
con dispositivo para colocación rectal, rodillo de rectoscopia, apoya-brazos y almohadilla apoya-cabeza



Urología y ginecología
con apoya-piernas y almohadilla apoya-cabeza



ORL y oftalmología
con calota de cabeza, almohadilla semicircular y talonera acolchada



Cirugía de mínima invasión
con almohadilla apoya-cabeza, apoya-brazos, sujeta-piernas, talonera acolchada y placa apoya-pies



Artroscopia del hombro
con placa dorsal (tres segmentos), apoya-cabeza, apoya-brazos y talonera acolchada



Artroscopia de la rodilla
con anillo para la cabeza, apoya-brazos, dispositivo para artroscopia y talonera acolchada



Neurocirugía
con apoya-brazos, almohadilla apoya-cabeza y sistema de sujeta-cráneo



Cirugía de banda gástrica
con anillo para la cabeza, apoya-brazos y talonera acolchada






Ortopedia
con dispositivo de extensión y anillo para la cabeza







Cirugía de la mano y el brazo
con anillo para la cabeza, dispositivo de extensión del brazo y fijador de dedos de Weinberger






Características técnicas

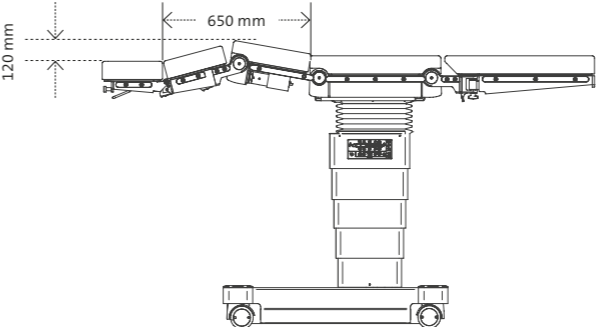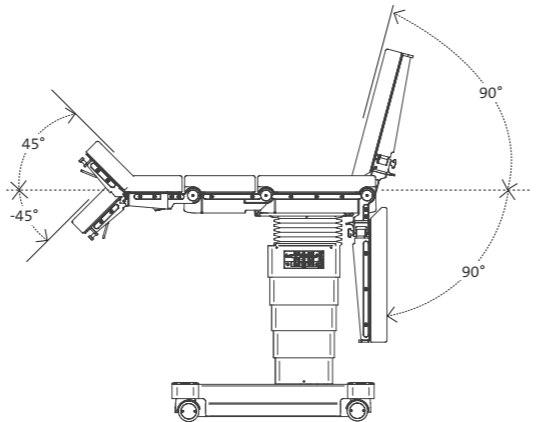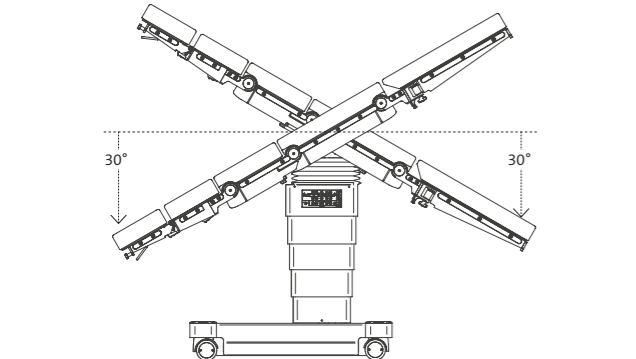


Desplazamiento longitudinal (opcional)

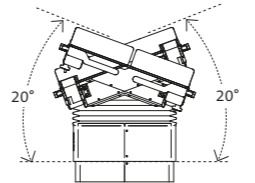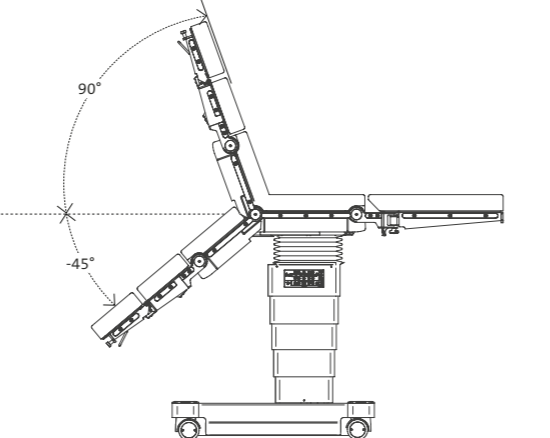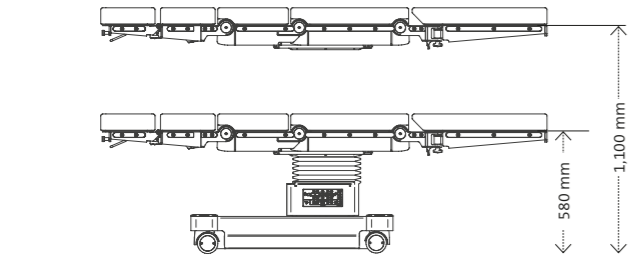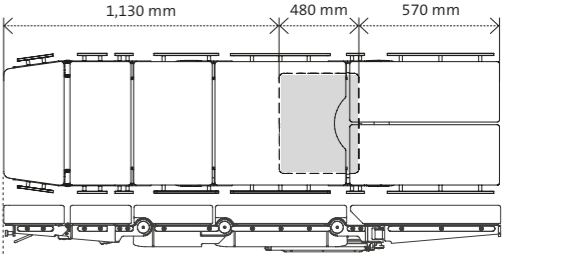

Vista de planta

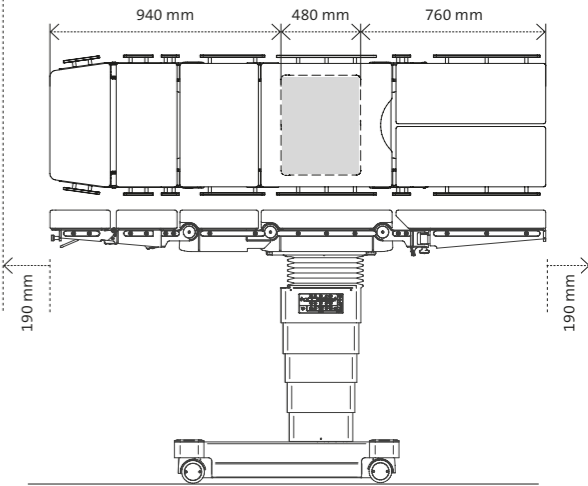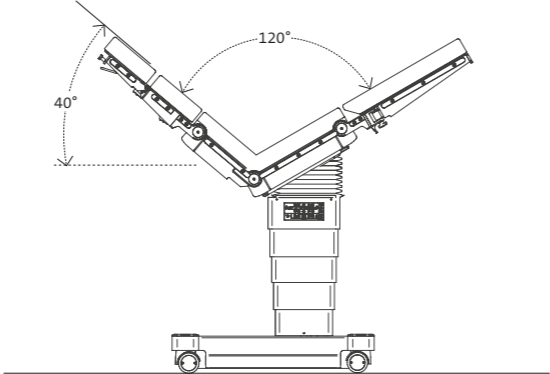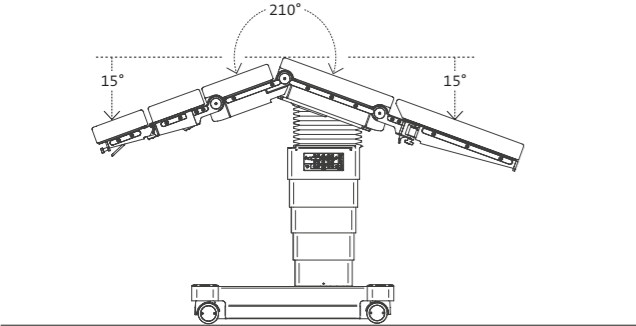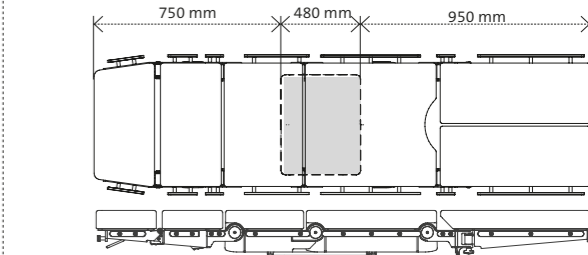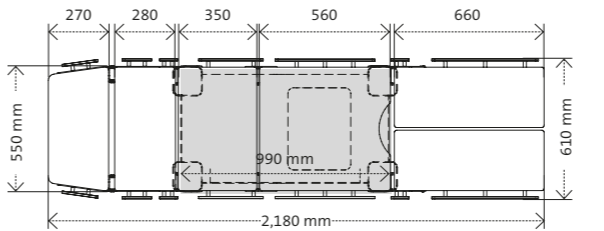

Configuración

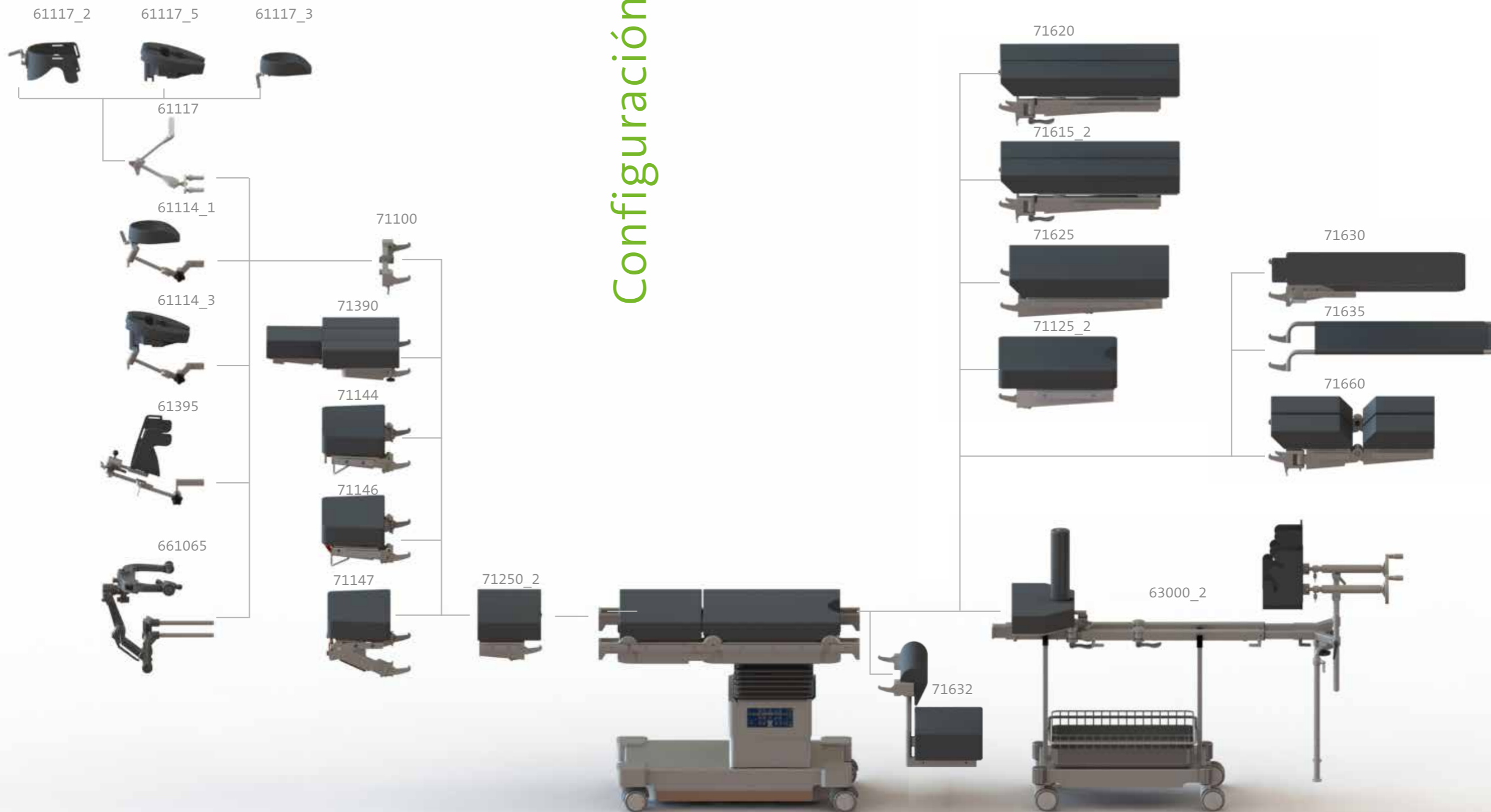

Accesorios para medifa 7000



Interruptor de pedal para medifa 7000

Ref. 704060

- Para las funciones altura, lateral y Trendelenburg
- Con cable



Mando a distancia por infrarrojo para medifa 7000

Ref. 704070

- Transmisión de datos por medio de señales de infrarrojo
- Panel de control para todos los ajustes eléctricos
- Incl. cargador



Desplazamiento longitudinal para medifa 7000

Ref. 71640

- Desplazamiento longitudinal de la superficie eléctrico de hasta 380 mm
- Cambia la altura más baja de la mesa de operaciones de 580 mm a 600 mm
- Sin instalación ulterior!



Mecanismo de tracción electrónico para medifa 7000

Ref. 70645

- Accionamiento de traslación eléctrico gracias a la quinta rueda que facilita la colocación de la mesa
- Sin instalación ulterior!



Asideros para el mecanismo de tracción Ref. 70645

Ref. 71570

- Para el manejo motorizado de mesa de operaciones con preciso regulador de velocidad integrado
- Posibilidad de movimiento de marcha hacia adelante y atrás
- Material: Acero inoxidable



Sistema de seguridad para medifa 7000

Ref. 70655

- Asegura el funcionamiento de las funciones básicas (altura, regulación lateral, regulación Trendelenburg y freno central) de la mesa en caso de fallo eléctrico gracias a una batería de 24 V
- Opcional, no puede integrarse posteriormente



Túnel continuo para los cassetes radiográficos para modelo 700200
Ref. 71642_2

- Para radiografía convencional

Túnel continuo para los cassetes radiográficos para modelo 700300
Ref. 71642_3

- Para radiografía convencional



Anclaje para dispositivo de extensión 63000_2 para mesas de la serie 7000
Ref. 63005_1

- Para mesas de la serie 7000 sin desplazamiento longitudinal
- Para colocar el dispositivo de extensión

Anclaje para dispositivo de extensión 63000_2 para mesas de la serie 7000
Ref. 63005_2

- Para mesas de la serie 7000 con desplazamiento longitudinal
- Para colocar el dispositivo de extensión



Apoya-cabeza para medifa 7000
Ref. 71144

- Regulación asistida por cilindro neumático de -45° a +45°
- Acoplable en la placa dorsal
- Radiotransparente
- L x Ancho: 266 x 550 mm
- Colchón: SF, espesor = 80 mm, conductivo eléctrico, desmontable



Apoya-cabeza para medifa 7000
Ref. 71146

- Regulación asistida por cilindro neumático de -45° a +45°
- Inclinación adicional gracias a la doble articulación
- Acoplable en la placa dorsal
- Radiotransparente
- L x Ancho: 266 x 550 mm
- Colchón: SF, espesor = 80 mm, conductivo eléctrico, desmontable



Apoya-cabeza para medifa 7000
Ref. 71147

- Reposacabezas con doble articulación
- Ajustable con una mano
- Fácil ajuste mediante resorte de gas de -45° a +45°
- Inclinación adicional gracias a doble articulación
- Fácil acoplamiento y desacoplamiento a la placa de respaldo
- Radiotransparente
- Largo x ancho: 266 x 550 mm
- Acolchado viscoelástico SF, grosor= 80 mm, eléctricamente conductivo, montable



Guías laterales
Ref. 71148

- Guías laterales adicionales para la cabecera del apoya-cabeza
- L: 300 mm
- Material: Acero inoxidable
- Compatible con: 71144, 71146
- Pieza



Guías laterales

Ref. 71149

- Guías laterales adicionales para ambos lados de la placa apoya-cabeza
- L: 160 mm
- Material: Acero inoxidable
- Compatible con: 71144, 71146
- Par



Placa dorsal superior para medifa 7000

Ref. 71250_2

- Acoplable en la placa dorsal
- Radiotransparente
- L x Ancho: 268 x 550 mm
- Colchón: Viscoelástico, E = 80 mm, conductivo eléctrico, desmontable
- Con guías laterales (UE)



Placa dorsal para medifa 7000

Ref. 71390

- Incl. Apoya-cabeza
- Tres segmentos desmontables garantizan acceso flexible al hombro
- Acoplable en la placa dorsal inferior
- Radiotransparente
- L x Ancho: 320 x 550 mm
- Colchón: SF, espesor = 80 mm, conductivo eléctrico, desmontable



Extensión para la sección pélvica compatible con medifa 7000

Ref. 71125_2

- Extensión: 400 mm
- Recorte especial en la sección pélvica
- Radiotransparente
- L x Ancho: 400 x 550 mm
- Colchón: SF, espesor = 80 mm, conductivo eléctrico, desmontable
- Para procedimientos endo-urológicos
- Con guías laterales (UE)



Placa para piernas compatible con medifa 7000

Ref. 71625

- Con ajuste eléctrico
- Acoplable en la sección pélvica
- Radiotransparente
- L x Ancho: 660 x 550 mm
- Colchón: SF, espesor = 80 mm, conductivo eléctrico, desmontable
- Con guías laterales (UE)



Placas para piernas compatible con medifa 7000 (par)

Ref. 71615_2

- Con ajuste eléctrico, giratoria
- Movimiento de tijera de 180°
- Acoplable en la sección pélvica
- Radiotransparente
- L x Ancho: Cada 660 x 266 mm
- Colchón: SF, espesor = 80 mm, conductivo eléctrico, desmontable
- Con guías laterales (UE)

Accesorios para medifa 7000



Placas para piernas con extensión de accesocompatible con medifa 7000 (par) Ref. 71620

- Con ajuste eléctrico
- Gira hacia fuera para el acceso directo del paciente
- Acoplable en la sección pélvica
- Radiotransparente
- L x Ancho: Cada 740 x 266 mm
- Colchón: SF, espesor = 80 mm, conductivo eléctrico, desmontable
- Con guías laterales (UE)



Placas para piernas de 4 partes compatible con medifa 7000 (par) Ref. 71660

- Con ajuste eléctrico, giratoria y doblegable
- Movimiento de tijera de 180°
- Acoplable en la sección pélvica
- Radiotransparente
- L x Ancho: Cada 662 x 266 mm
- Colchón: SF, espesor = 80 mm, conductivo eléctrico, desmontable
- Con guías laterales (UE)
- Par



Placa de fibra de carbono para medifa 7000 Ref. 71630

- Incl. colchón
- Para la radiografía intraoperatoria, radiopermeable en 360°
- Acoplable en la sección pélvica o a la placa dorsal (parte inferior)
- L x Ancho: 750 x 540 mm
- Colchón: SF, espesor = 70 mm, conductivo eléctrico, desmontable



Soporte de transferencia para piernas compatible con medifa 7000 Ref. 71635

- Para sostener las piernas durante un período corto
- Acoplable en la sección pélvica
- L x Ancho: 900 x 500 mm



Elementos de extensión para medifa 7000 (par) Ref. 61355SF

- Para plataforma de la mesa
- Con guías laterales (UE)
- L x Ancho: Cada segmento 310 x 110 mm
- Colchón: SF, espesor = 70 mm, conductivo eléctrico, desmontable



Porta-chasis radiográfico para medifa 7000 Ref. 71643

- Para cassetes de radiografía
- Con barra ajustable en altura
- L x Ancho x A: 470 x 385 x 16 mm
- Para cassetes de radiografía con dimensiones 14" x 17" (US)
- Material: Acero inoxidable
- Compatible con: 71642_2, 71642_3

Accesorios adicionales

Una amplia gama de accesorios adicionales complementa las aplicaciones quirúrgicas.

Para el almacenaje de los accesorios que se van a instalar, sugerimos un carro porta-accesorios (réf. 341045) fabricado en acero inoxidable.

Encontrará más accesorios en nuestro folleto „Accesorios para mesas de operaciones“.



medifa

Competencia en torno al quirófano

Como fabricante líder internacional de productos médicos, medifa ofrece soluciones y productos innovadores para quirófanos, sistemas híbridos de quirófano móviles y otras áreas en hospitales o centros de operaciones ambulatorias.

La amplia gama de productos incluye mesas operatorias móviles y accesorios quirúrgicos, mesas operatorias móviles de carbono, lámparas quirúrgicas (medifa H!Light), así como sillones de exploración y tratamiento para ginecología, urología y proctología.


Los productos se desarrollan, diseñan y fabrican en Alemania. Con una elevada proporción de creación de valor dentro del grupo de empresas, medifa garantiza a sus clientes tiempos de respuesta rápidos y una alta calidad „Made in Germany“ conforme a las normas de calidad nacionales e internacionales certificadas.

medifa se orienta consecuentemente a las exigencias de sus clientes. Siguiendo el lema „we care“, los clientes de todo el mundo pueden confiar en el asesoramiento, la mano de obra y la calidad de primera clase de un único proveedor.

Productos

- Lámparas de quirófano (medifa H!Light)
- Mesas de operaciones móviles
- Mesas de operaciones móviles carbón para aplicaciones mínimamente invasivas
- Accesorios para mesas de operaciones y lámparas
- Sillones de reconocimiento y sillones de exploración y tratamiento (ginecología, urología y proctología)
- Mobiliario funcional médico

medifa en el mundo

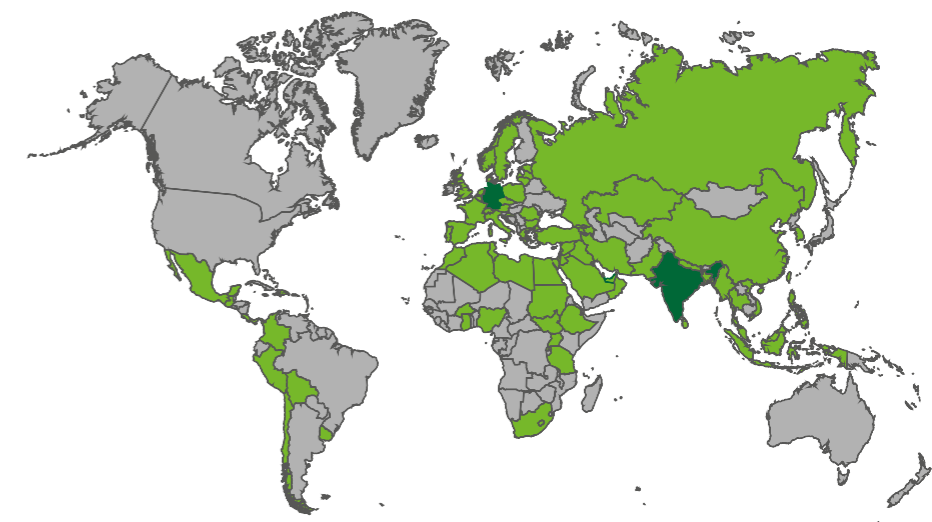




medifa GmbH

Industriestraße 5
57413 Finnentrop
Germany
fon +49 2721 71 77 -0
fax +49 2721 71 77 -255
info@medifa.com

Version 01-23-ES

Sujeto a modificaciones debidas al desarrollo técnico. Este documento tiene como objetivo proporcionar información a una audiencia internacional fuera de los Estados Unidos.

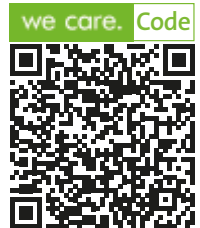

Made in Germany